

HC150

A próxima geração em **umidificação CPAP**



- Ambient Tracking™ para prevenir condensação
- Compatível com inversor AC/DC
- Design melhorado

ACESSÓRIOS DO HC150		ESPECIFICAÇÕES DO HC150
900HC105	Starter Kit (recomendado)	Tamanho 5,4cm x 13,2cm x 14,6cm
HC325D	2 x Câmara HC325	Peso 0,8 kg com a câmara
HC325T	20 x Câmara HC325	Alcance da chapa de aquecimento 30°C a 65°C à temperatura ambiente de 25°C
900HC007	Bandeja de montagem	
900HC008	Tubo reutilizável, paciente único (61cm)	
900HC221	Tubo reutilizável, paciente único (183cm)	
HC300	kit de câmara lavável em máquina de lavar pratos – inclui a câmara HC300 com o tubo autoclavável 900HC009 (61cm)	

Para mais informações, por favor contactar seu representante local da Fisher & Paykel

A Fisher & Paykel tem uma política de contínuo melhoramento dos produtos e se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Patenteado nos principais países do mundo.

INTERNATIONAL P.O.Box 14-348, Panmure, Auckland 6, New Zealand Tel: +64-(0)9-574 0100 Fax: +64-(0)9-574 0158 Email: info@fphcare.com Web Site: www.fphcare.com
AUSTRALIA Tel: +61-(0)3-9879 5022 Fax: +61-(0)3-9879 5232 **FRANCE/BENELUX** Tel: +33-(0)1-64 46 52 01 Fax: +33-(0)1-64 46 52 21
GERMANY/AUSTRIA Tel: +49-(0)7182-93777-0 Fax: +49-(0)7182-93777-99 **UK/IRELAND** (EU Authorised Representative) Tel: +44-(0)1628-626 136 Fax: +44-(0)1628-626 146
USA Tel: 1800 446 3908 or +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

HC150

A próxima geração em **umidificação CPAP**



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

HC150

A próxima geração em **umidificação CPAP**

Por que umidificação aquecida?

A umidificação aquecida melhora o conforto e a aceitação do usuário

Até 80% dos usuários de CPAP se queixam de sintomas nas vias aéreas superiores ou nasais. Infelizmente esses sintomas podem ser tão severos que os usuários ficam impossibilitados de continuar o tratamento.


A mucosa nasal é responsável pelo aquecimento e umidificação do ar que respiramos. Pesquisas têm mostrado que o aumento de fluxo de ar de CPAP pode prejudicar nossa habilidade natural de umidificar o ar inspirado. Como resultado, a mucosa nasal pode ficar ressecada, irritada e inchada.

O HC150 adiciona umidificação aquecida à terapia CPAP comum, mantendo a hidratação da mucosa e prevenindo desconforto.

Ambient Tracking™ para evitar condensação

Umidade máxima, condensação mínima

Através de um sistema eletrônico avançado, Ambient Tracking™ ajusta automaticamente a temperatura da placa de aquecimento de acordo com as alterações da temperatura ambiente. A condensação é minimizada enquanto que a umidade é maximizada.

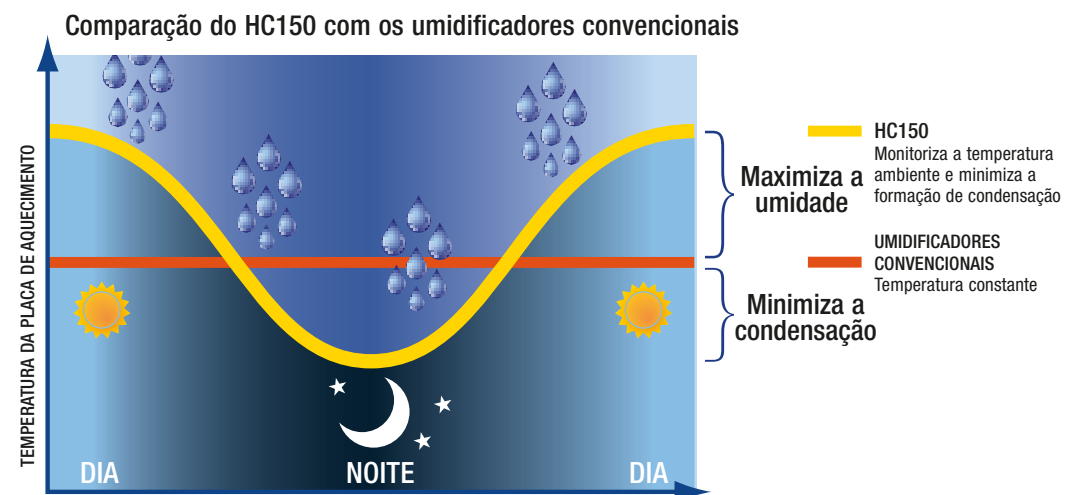

O Ambient Tracking™ permite que o usuário ajuste a temperatura da placa de aquecimento a um nível mais alto do que com um umidificador convencional sem causar condensação. O usuário recebe então mais umidade durante a noite.

À medida que a temperatura ambiente vai descendo durante a noite, o Ambient Tracking™ reduz a temperatura da placa de aquecimento para minimizar a condensação.

HC150

A próxima geração em **umidificação CPAP**

Design melhorado

- Ambient Tracking™
- Controles simples de umidade
- Botão frontal de ligar/desligar
- Compatível com inversor AC/DC
- Pequeno e compacto

A umidificação previne

- Ressecamento, congestão e desconforto nasal

A umidificação promove

- Conforto do usuário
- Uso CPAP



Fisher & Paykel
HEALTHCARE